

MultimatEasy



Der Essenzielle

Ein Resultat der Reife

**DENTSPLY**

Der Essenzielle

# Ein Resultat der Reife

Weil nur besser wird, wer beständig an seiner Technik arbeitet, wurde die gereifte und bewährte Ofenreihe weiterentwickelt zu noch mehr Leistung bei Vereinfachung der Bedienung. Das Ergebnis ist der Multimat Easy. Er entspricht in seiner technischen Ausstattung den täglichen Arbeitsabläufen im Labor: platzsparend kompakt – ideal für kleine Labors, Praxislaboratorien oder als Zweitofen.



## Display

Das neu gestaltete User Interface ermöglicht durch seine Funktionalität einen schnellen Überblick auf alle relevanten Funktionen. Das zweizeilige Display zeigt die Informationen, die für den Verlauf eines Keramikbrandes wichtig sind.




## Technik

Stand der Technik: Die bewährte Quarzglas-Spiralmuffel sorgt für eine homogene Wärmeverteilung innerhalb der Brennkammer. Das zahlt sich in den Brennergebnissen aus: verlässliche, konstante Qualität, die jederzeit reproduzierbar ist.



## Platine

Neueste Prozessortechnologie, schnelle Reaktionszeit durch hohe Taktfrequenz, modernste Sensortechnik, integrierte Temperaturüberwachung; All dies lässt den Multimat Easy noch sicherer in den Anwendungen werden. Mittels USB-Port können Sie problemlos Ihren Multimat Easy auf den neuesten Software-Stand bringen.

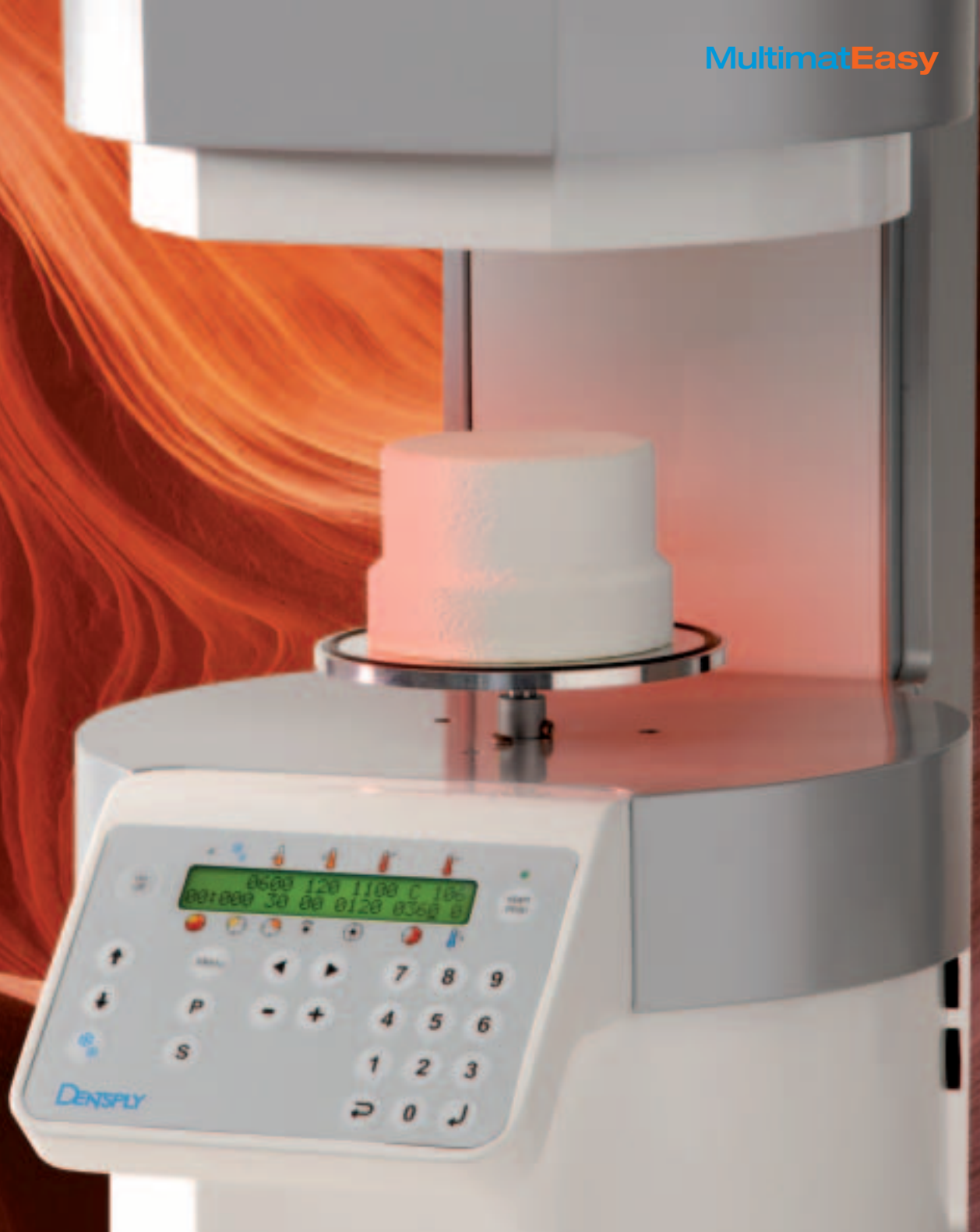

### Dimensionen

Der Multimat Easy besticht durch seine kompakte Bauweise und seine sensationell kleine Grundfläche. Wahlweise können durch ergonomisch geformte magnetische Platten die Ablageflächen individuell vergrößert und Ihren Ansprüchen angepasst werden.

### Programme

100 Programmspeicherplätze sichern Ihnen eine übersichtliche Verwaltung der Standard- und individuellen Keramikprogramme zu. Zum entsprechenden Abkühlen der jeweiligen Keramik stehen Ihnen drei Kühlstufen zur Verfügung. Selbstverständlich können Abläufe während des Brandes jederzeit verändert werden.

### Sicherheit

Der Multimat Easy ist unter anderem mit einer Netzausfallüberbrückung ausgerüstet, die Ihre eingegebenen Daten während des Brandes kurzzeitig sichert und es ermöglicht, den Brand gefahrlos weiterzuführen. Zudem können Sie die Daten Ihrer Brennprogramme auf einen USB-Stick sichern.

**MultimatEasy**

- Exakte Temperatursteuerung
- Kompakte Bauweise, kleine Grundfläche
- Sichere Brandführung, neue Technologie
- Einfache Bedienung
- 100 Programme
- Übersichtliches zweizeiliges Display
- USB-Anschluss für Software-Updates und Datensicherung
- Servicefreundlich

**MultimatEasy**

Höhe: ca. 605 mm  
Breite: ca. 278 mm  
Tiefe: ca. 422 mm  
Gewicht: ca. 22 kg

Spannung: 110 – 125 V  
230 – 240 V  
Frequenz: 50 – 60 Hz  
Leistung: 1.300 W (ohne Pumpe)

Zubehör: REF 54 6026 0100 Magnetische Ablageplatte zweiseitig (90°)  
REF D 03 532 803 Silber-Kalibrierset  
REF D 03 002 220 VD Biodent Vakuum-Pumpe

Technische Änderungen vorbehalten