

Ein Ofen nach

Ihren Wünschen:




der Multimat C

So kompakt kann

MULTI

... Platz sparend, ideal
für kleine Labors und
Praxislaboratorien.

DENTSPLY, seit mehr als 60 Jahren einer der führenden Hersteller von Vakuum-Keramiköfen, präsentiert den leistungsstarken Kompakt-Ofen Multimat C. Hochmoderne Technik für präzise Brandführung und ein umfassendes Leistungsspektrum zeichnen ihn aus.

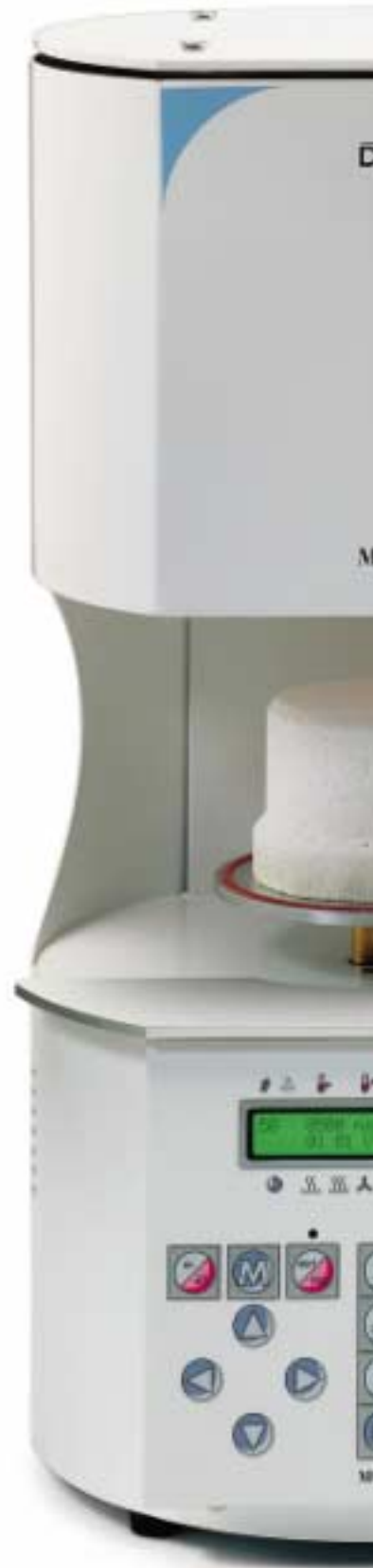

Multimat® C – die clevere Ergänzung der

MAT[®]



Kompakte Bauweise

Besonders geeignet für kleine Arbeitsräume, spart wertvollen Platz auf dem Arbeitstisch.

Programmschutz

Automatische Brandfortsetzung nach kurzzeitigem Stromausfall. Unbegrenzte Datensicherung.

Quartz-Spiralmuffel

Gute Wärmeverteilung und Schutz vor unbeabsichtigter Berührung stromführender Teile.

Modernste Technologie

Die neue Mikrocontroller-Technologie garantiert exakte Temperatursteuerung und genaue Brennabläufe.

Vakuum

Die Höhe des Vakuums kann individuell eingestellt werden und ist auf dem Display in Absolutwerten dargestellt.

99 Programme

Jedes Programm kann individuell eingestellt werden. Die Änderung der Parameter ist auch während des Brennvorganges möglich.

Beleuchtetes LCD-Display

Das alphanumerische Display kontrolliert und aktualisiert ständig alle relevanten Informationen, wahlweise in 5 Sprachen.

Kühlfunktion

3 wählbare Kühlstufen zur Vermeidung von Wärmeshocks. „Quick cooling function“ für rationelles Arbeiten.

MULTIMAT® C**Technische Daten**

Durchmesser: 28 cm

Höhe: 59 cm

Grundfläche: ca. 615 cm²

Gewicht: 17,5 kg

Spannung: 230 V

Frequenz: 50/60 Hz

Leistung: 1.300 VA (ohne Pumpe)

Und wenn **Sie** noch
mehr möchten ...

MULTIMAT® Touch&Press

Der Keramikofen, mit dem Sie auch pressen können. Durch die Modulbauweise „wächst“ der Ofen mit Ihren Ansprüchen. Der Multimat Touch&Press bietet ein ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis. Fordern Sie ausführliche Informationen an.



Gleich, ob Sie sich für den Multimat C oder den Multimat Touch entscheiden, auf jeden Ofen erhalten Sie eine Herstellergarantie von 2 Jahren.